

voco

HIGHLIGHTS

Kompozyt o wysokiej wydajności
GrandioSO Unlimited – uniwersalny
kompozyt zakładany warstwami
do 4 mm, dostępny w pięciu
odcieniach klastrowych

**Przyżyciowy i przeznaczony
do codziennego użycia**
Zachowanie żywej miazgi i jej
pokrycie biomateriałem MTA vpt
(Vital Pulp Therapy)

Smakowity
Profluorid Varnish+BioMin
z bioszkłem to nowa
moc utwardzania
szkliwa

**Spełnia każde
życzenie**

GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Uniwersalny kompozyt zakładany warstwami do 4 mm,
dostępny w pięciu odcieniach klastrowych

Estetyczne, uniwersalne materiały kompozytowe stosuje się warstwami do 2 mm, co sprawia, że proces wypełniania rozległych ubytków jest czasochłonny. Ogromnym ułatwieniem jest użycie materiałów bulk-fill, których warstwy mogą mieć grubość nawet 4 mm. Jednak, ze względu na niewystarczającą estetykę kompozyty te są zwykle stosowane w odcinku bocznym. VOCO znalazło rozwiązanie tworząc uniwersalny materiał GrandioSO Unlimited. Ten estetyczny kompozyt można nakładać warstwami do 4 mm w odcinku zarówno przednim, jak i bocznym. Mając GrandioSO Unlimited nie potrzebujesz innych kompozytów uniwersalnych!

System odcieni klastrowych

Mając tylko 5 odcieni w gabinecie jesteś optymalnie przygotowany na każdą sytuację i możesz znacznie zmniejszyć Twoje zapasy produktów. Dzięki uproszczonemu systemowi kolorystycznemu, 5 odcieni klastrowych zastępuje 16 klasycznych odcieni VITA®:

GrandioSO Unlimited	A1				A2		A3				A3.5				A4	
	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4
VITA® classical																

Kompozyt o wysokiej wydajności

Dzięki imponującej zawartości wypełniacza wynoszącej 91% masy, GrandioSO Unlimited wyznacza również nowe standardy w zakresie stabilności i wytrzymałości. Niski skurcz objętościowy (1,44%) zmniejsza ryzyko powstawania szczelin i przebarwień brzeżnych oraz przyczynia się do uzyskania wypełnień o najwyższej jakości.



Test pack

Caps 10 × 0,3 g
(po 2 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ karta odcieni

REF 6257

Oszczędzasz
20%*

Zestaw strzykawki

Strzykawki 5 × 4,5 g
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ karta odcieni

REF 6258

Zestaw Caps

Caps 75 × 0,3 g
(po 15 × A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ karta odcieni

REF 6270

Więcej informacji na temat zestawów
i pojedynczych odcieni znajduje się
na stronie www.voco.dental

Kompozyt o wysokiej wydajności

Uniwersalny

Stosowany w zębach
przednich i bocznych

Najwyższa stabilność i wytrzymałość

91% wypełniacza

5 odcieni Cluster-Shade

Zastępuje wszystkie
16 odcieni VITA®

Bez nakładania cienkimi warstwami

Warstwy o grubości do 4 mm

Wyjątkowa estetyka

Doskonała polerowalność



MTA vpt

Utrzymanie żywotności miazgi w codziennej praktyce
– biogodność i brak monomerów

Biozgodne, stabilne i odporne na bakterie uszczelnienie miazgi jest niezbędne, aby utrzymać jej żywotność. Stworzony przez VOCO MTA vpt zawiera mineralny agregat trójtlenkowy (MTA) i doskonale spełnia to zadanie. W ramach leczenia przyżyciowego (Vital Pulp Therapy - VPT) MTA vpt można stosować do pośredniego i bezpośredniego pokrycia miazgi, pokrycia miazgi po amputacji (częściowej lub całkowitej) oraz jako materiał podkładowy typu liner. W ramach leczenia zmian próchnicowych, MTA vpt można stosować do niezawodnego uszczelnienia resztkowej zębiny próchnicowej.

Podczas wiązania MTA vpt uwalnia jony wapnia i wodorotlenku, które stymulują własne procesy regeneracyjne organizmu i tworzenie zębiny trzeciorzędowej. Wynikające z tego wysokie pH jest znane ze swojego działania bakteriostatycznego i wspomaga remineralizację. W ten sposób MTA vpt tworzy stabilną i szczelną barierę chroniącą przed bakteriami, zapewniając optymalne warunki do utrzymania żywotności miazgi.

- MTA do codziennego użycia – biogodny, wolny od monomerów
- Wysoka wartość pH (12) – znana z działania bakteriostatycznego
- Uwalnianie jonów wapnia i wodorotlenku – sprzyja powstawaniu zębiny trzeciorzędowej i remineralizacji
- Niezawodna ochrona miazgi – mineralizuje, tworząc uszczelnienie odporne na bakterie
- Oszczędność czasu – natychmiastowe dalsze postępowanie dzięki nakładaniu warstw bez nacisku
- Łatwe postępowanie – nakładanie z użyciem standardowych narzędzi lub bezpośrednio z kapsułki
- Brak przebarwień związanych z produktem – wolny od tlenku bizmutu i związków zawierających żelazo
- Widoczność na zdjęciach rtg (290% AI)



MTA vpt

Mieszanie ręczne
10 g proszek + 10 ml płyn

REF 1645

MTA vpt AC

Kapsułki aplikacyjne 25 szt.

REF 1646



Atrakcyjny cenowo materiał MTA do codziennej praktyki

Cement podkładowy do wszystkich
materiałów wypełniających

Pokrycie
pośrednie miazgi

Pokrycie
bezpośrednie miazgi

Zaopatrzenie miazgi
po amputacji przyżyciowej





Bifix Temp fluorescent

Podwójnie utwardzalny cement kompozytowy
do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycznych

Bifix Temp harmonijnie wtapia się w uzupełnienie tymczasowe, dzięki przeziernemu odcieniowi zbliżonemu do zęba. Estetyka uzupełnienia pozostaje niezmieniona w naturalnym świetle i nawet w świetle UVA fluorescencja nie jest widoczna pod uzupełnieniem. W świetle UVA materiał fluoryzuje bardzo intensywnie, co ułatwia wykrycie i usunięcie najmniejszych pozostałości cementu po usunięciu uzupełnienia tymczasowego i pomaga w precyzyjnym osadzeniu uzupełnienia ostatecznego. Już sama ta zaleta sprawia, że czasochłonny proces przygotowania filaru do osadzenia uzupełnienia jest bardziej skuteczny.



Bifix Temp fluorescent

QuickMix strzykawka 5 ml
+ akcesoria

REF 1056

AlignerFlow LC

Fluorescencyjny kompozyt do zaczepów nakładek

Leczenie z użyciem alignerów na stałe weszło do spektrum zabiegów oferowanych przez gabinety stomatologiczne i ortodontyczne, w których dużą rolę odgrywają mocowania. Do wykonania precyzyjnych zaczepów w przypadku nakładek stosuje się specjalne kompozyty. AlignerFlow LC firmy VOCO to nanohybrydowy kompozyt z efektem fluorescencyjnym, specjalnie zaprojektowany do stosowania z nakładkami. Materiał jest widoczny w świetle UVA, co zapewnia kontrolę zaczepów oraz gwarantuje precyzyjną identyfikację i delikatne usunięcie wszelkich pozostałości produktu z powierzchni szkliva po zakończeniu leczenia.



AlignerFlow LC

Strzykawki 2 × 2 g A1

REF 1526

Strzykawki 2 × 2 g A2


REF 1527

Strzykawki 2 × 2 g A3

REF 1528

Zalety w skrócie

- Precyzyjne nałożenie z doskonałym zapływaniem
- Utwardzanie światłem przez przezroczystą szynę szablonową
- Stabilność i odporność na ścieranie przez cały okres leczenia

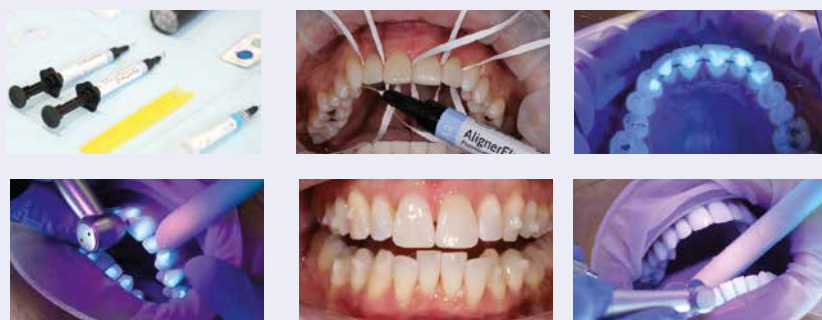

Źródło: dr Montse Galiano, Zjednoczone Królestwo



Clip F fluorescent

Światłoutwardzalny materiał
do wypełnień tymczasowych

Clip F fluorescent zachwyca swoją wszechstronnością i prostym użyciem. Ten jednoskładnikowy materiał łatwo nakłada się i formuje. Utwardzanie światłem sprawia, że Clip F fluorescent jest odporny na ślinę i można go natychmiast obciążać. Elastyczne właściwości materiału pozwalają na usuwanie go bez resztek, z pozostawieniem w większości przypadków czystych i nieuszkodzonych brzegów preparacji. W świetle UVA wykrywanie i usuwanie niewielkich nadmiarów i pozostałości materiału jest znacznie łatwiejsze, szczególnie w przypadku cienkich warstw, które trudno jest zauważyć gołym okiem. Clip F fluorescent nadaje się do wszystkich rodzajów wypełnień tymczasowych, również przy wkładach koronowych i nakładach, oraz do zabezpieczania otworów śrub.



Clip F fluorescent

Strzykawki 2 × 4 g

REF 1288

Rebilda DC fluorescent

Pierwszy podwójnie utwardzalny system do odbudowy
zrębu i osadzania wkładów, który oferuje fluorescencję na życzenie

Rebilda DC fluorescent, podwójnie utwardzalny, kompozytowy system do odbudowy zrębu zęba i osadzania wkładów koronowo-korzeniowych, to nowy członek rodziny produktów Rebilda. Materiały Rebilda są z powodzeniem stosowane na całym świecie i od wielu lat cieszą się dużym zaufaniem lekarzy dentyków, szczególnie ze względu na ich właściwości podobne do zębiny.

Teraz, do istniejących odcieni zębinowego, białego i niebieskiego, dodaliśmy wersję fluorescencyjną, co po raz kolejny pokazuje jak bardzo innowacyjna jest firma VOCO.



Kartusz 50 g,
fluorescencyjny zębinowy,
+ akcesoria

REF 1399

QuickMix strzykawka 10 g,
fluorescencyjny zębinowy,
+ akcesoria

REF 1406

Fluorescencja widoczna w świetle UVA

Doskonała widoczność nadmiarów
materiału i brzegów odbudowy, również
w obszarach podziąsłowych

Łatwość użycia

Podczas opracowania
zachowuje się jak zębina,
Płynna konsystencja
– doskonała adaptacja

Doskonała estetyka

W świetle dziennym ma kolor zębinowy,
więc idealnie nadaje się do wykonywania
rekonstrukcji o wyjątkowej estetyce

Podwójne utwardzanie

Zastosowanie w kanale korzeniowym
do osadzania wkładów koronowo-
korzeniowych (np. Rebilda Post)



Profluorid Varnish + BioMin

Skutecznie utwardza osłabione szkliwo
– w czterech przyjemnych smakach

Uznany lakier fluorkowy – VOCO Profluorid Varnish – został wzbogacony o bioszko firmy BioMin. To niewidoczne bioszko rozpuszcza się w obecności śliny i uwalnia jony wapnia i fosforanu, które wspomagają remineralizację zęba. W połączeniu z fluorem z lakieru, na powierzchni zęba tworzą się krystaliczne struktury, które między innymi znacznie utwardzają osłabione kwasem szkliwo.

Prawdziwa podwójna ochrona w połączeniu z udowodnionym znoszeniem nadwrażliwości!

Oszczędzasz
25%*

200 × 0,40 ml SingleDose

Karmel	REF 2276
Wiśnia	REF 2277
Mięta	REF 2278
Guma balonowa	REF 2279

50 × 0,40 ml SingleDose

Karmel	REF 2270
Wiśnia	REF 2271
Mięta	REF 2272
Guma balonowa	REF 2273

10 ml Tuba

Karmel	REF 2266
Wiśnia	REF 2267
Mięta	REF 2268
Guma balonowa	REF 2269

Mixed Flavour

48 × 0,40 ml SingleDose
Asortyment: karmel, wiśnia, mięta, guma balonowa

REF 2274



Profluorid Varnish

Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości (5% NaF)

Główną przyczyną nadwrażliwości jest odsłonięcie kanalików zębinowych, więc celem leczenia powinno być ich zamknięcie. Profluorid Varnish jest lakierem z fluorem, który skutecznie uszczelnia kanaliki zębinowe odsłonięte w okolicy szyjki zęba lub po opracowaniu ubytku.

Zalety w skrócie

- Szybkie znoszenie nadwrażliwości i uwalnianie fluoru (22.600 ppm fluoru)
- Łatwy w aplikacji i odporny na wilgoć
- Dostępny w siedmiu przyjemnych smakach
- Ekonomiczna aplikacja – nanosi się tylko cienką warstwę, wydajność

Oszczędzasz
25%*



10 ml Tuba

Melon	REF 1267	Karmel	REF 2232
Mięta	REF 2234	Wiśnia	REF 2233
Pina Colada	REF 2237	Cola Lime	REF 2236

200 × 0,40 ml SingleDose

Melon	REF 1271	Guma balonowa	REF 2239
Mięta	REF 2231	Wiśnia	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola Lime	REF 2241
Karmel	REF 2229		

Mixed Flavour

Tuba 4 × 10 ml
Asortyment: mięta, melon, wiśnia i karmel
REF 2971

Futurabond U

W praktycznym opakowaniu *SingleDose*

System Futurabond U powstał w oparciu o rozbudowany proces badań i rozwoju, któremu przyświecał jeden cel: stworzenie uniwersalnego systemu łączącego, który dla dentysty miałby same zalety, byłby niezawodny i sprawiłby, że w gabinecie stomatologicznym nie byłby już potrzebny żaden inny system łączący.

Futurabond U ustanawia nowe standardy pod względem siły łączenia oraz elastycznej i wszechstronnej aplikacji.

50 *SingleDose*

50 × Futurabond U
+ akcesoria

REF 1571

200 *SingleDose*

200 × Futurabond U
+ akcesoria

REF 1572

Oszczędzasz
12%*



Grandio blocs & Grandio disc

Nanoceramiczne hybrydowe materiały CAD/CAM
do stałych uzupełnień protetycznych

Grandio blocs/Grandio disc imponują swoimi właściwościami fizycznymi: doskonałą elastycznością, wytrzymałością i wysoką zawartością wypełniacza (86% wag.). Są zatem bardziej zbliżone do naturalnego zęba niż jakikolwiek inny materiał do uzupełnień protetycznych. Grandio blocs/disc to produkty, które są lepsze od konwencjonalnej ceramiki. Wykonane z nich uzupełnienia można łatwo opracowywać i polerować na wysoki połysk w jamie ustnej.



NOWOŚĆ


Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)

Na przykład:

A2 REF 6249
A3 REF 6250

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental

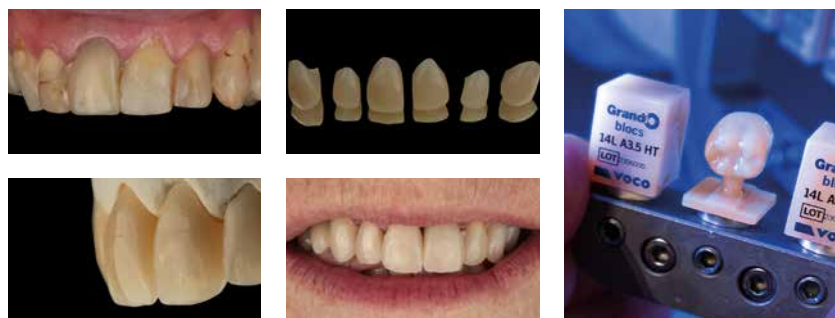

Źródło: dr Felipe Moura, Brazylia

Dostępne
także dla
Planmill®



Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT
REF patrz tabela

Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT
REF patrz tabela

	Do zębów przednich							Do zębów bocznych			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
No. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
No. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030


Bifix Veneer LC

Bezpieczne i estetyczne mocowanie licówek
z optymalnym protokołem postępowania

Szczególnie estetyczny, utwardzany światłem nanohybrydowy cement kompozytowy Bifix Veneer LC stworzono do prostego i bezpiecznego, adhezyjnego cementowania licówek oraz wkładów i nakładów wykonanych z kompozytu lub ceramiki. Materiał zawiera 81% wypełniacza.

Przejrzysta koncepcja kolorystyczna z trzema kolorami: jasnym, czystym i ciepłym ułatwia osadzanie licówek i ma pozytywny wpływ na efekt estetyczny. Dzięki precyzyjnie dopasowanym pastom próbnym można łatwo wybrać odpowiedni kolor i z wyprzedzeniem sprawdzić efekt ostateczny.

Intuicyjna i wydajna koncepcja kolorystyczna zapewniająca maksymalny efekt estetyczny

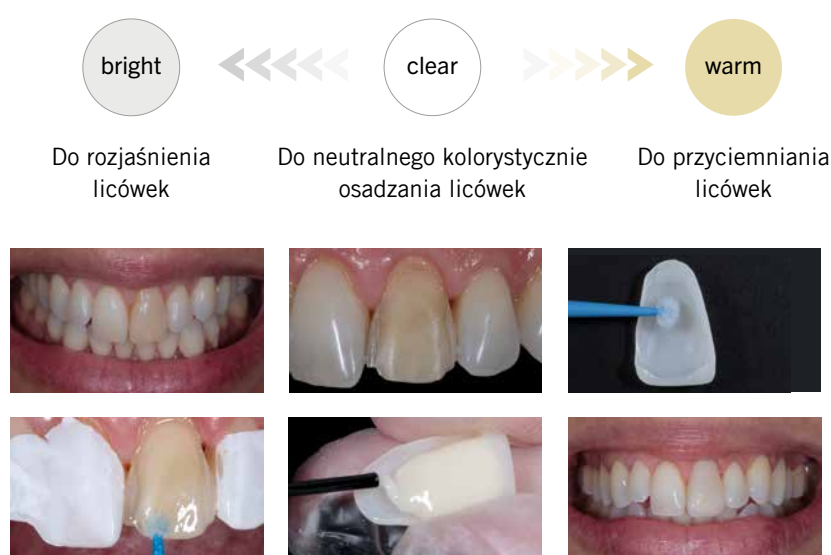


Źródło: prof. Carlos Torres, Brazylia

Aby zamówić prezentowane w tym katalogu produkty objęte ofertą specjalną, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy VOCO lub hurtownią stomatologiczną.

*w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

Oferty obowiązują tylko u partnerów prowadzących sprzedaż detaliczną, biorących udział w programie. Zmiany i błędy zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.

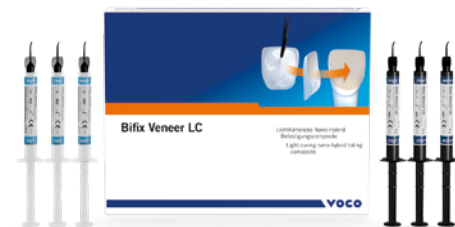

Bifix Veneer zestaw

Strzykawki 3 x 2 g Bifix Veneer LC
Strzykawki 3 x 2,5 g Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
+ akcesoria

REF 1428

Oszczędzasz
20%*

Bifix Veneer System zestaw

Strzykawki 3 x 2 g Bifix Veneer LC
Strzykawki 3 x 2,5 g Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm)
Strzykawki 2 ml Vococid
20 szt. *SingleDose* Futurabond U
20 szt. *SingleDose* Ceramic Bond
10 szt. Sticky Tim
+ akcesoria

REF 1429

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie www.voco.dental

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy



voco.dental